



CO₂ Easy Box system für Euthansie

Einfache Handhabung

Automatisch

Sicher

Kostengünstig

Entspricht EU Normen

combi-vet®




CO₂ Box system für Euthanasie

Post-experimentelles Nagetiere Euthanasie Gerät

Unser neues CO₂-Gerät vereinfacht das Euthanasie Verfahren. Besonders die Vermeidung von Stress für die Tiere. Das EasyBox Modul wird direkt auf den standardisierten Tecniplast Typ II oder Typ III Behälter aufgesetzt.

Die Begasung von CO₂ wird stresslos für die Tiere vorbereitet. Dies entsprechend des ausgewählten Käfigvolumens. Diese Anforderungen entsprechen der 2010 /63 / EU Norm welche die Richtlinie für Experimente mit dem Umgang der Tiere regelt.

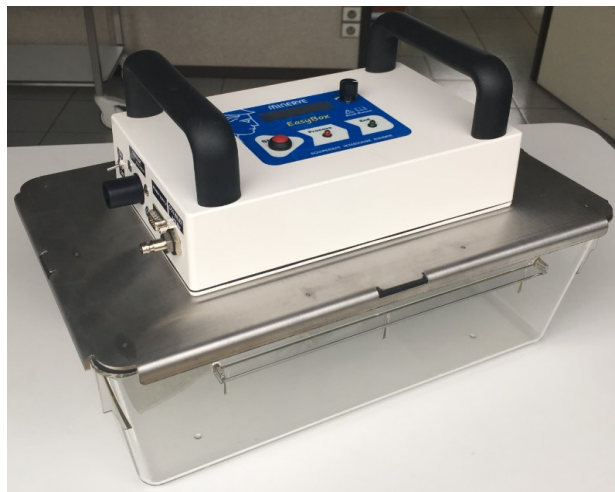

Am Ende des Zyklus wird das innere CO₂ Gasgemisch hinausgeleitet.



Die Benutzung ist äusserst einfach!

Wie funktioniert das System?

Der Controller verfügt über einen LCD-Bildschirm und eine einfache Tastatur für die Auswahl der Einstellungen und Speicherung mehrerer Programme. Die Tierart und das Käfigvolumen

kann jeweils eingestellt werden. Eine einzelne Taste startet nun den Zyklus. Sollte eine Störung vorhanden sein, bricht das Programm den Vorgang automatisch ab.

Zwei LED Leuchten zeigen jeweils den Modulstatus:

- Bereiten Sie den Käfig auf einem Tisch vor und entfernen Sie den Grill vom Behälter.

Drücken Sie die „**Start**“ Taste

Das CO₂ Gas strömt in die Kammer und wird automatisch in der Einfüllphase geregelt (CO₂ Eingangsdruck von 1 – 5 Bar 15-70 PSI)


Die Taste „**Process**“ leuchtet auf und nach ca. 11-15 Minuten ist der Vorgang beendet.

Die grüne Taste „**End**“ zeigt den Abschluss des Vorgangs.

- Am Ende des Vorgangs wird dies mit einem Signalton angegeben, dies sobald das CO₂ abgesaugt ist. Danach kann der Käfig entleert werden.

Das Gerät steht dann bereit für den nächsten Gaszyklus.



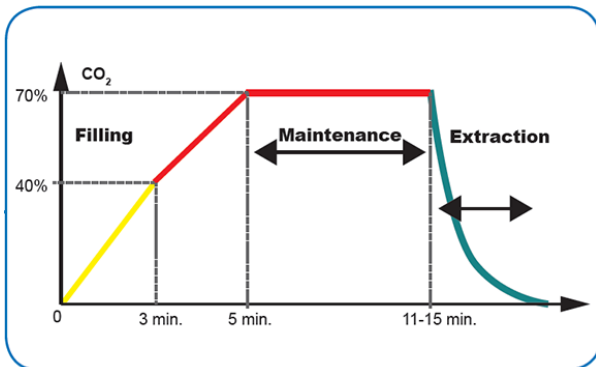

OPERATION DETAILS

The processes of all our systems are **automated, safe** and **strictly reproducible**. They consist of a filling, a maintenance and a gas extraction phase.



Compliant with European Directive
2010/63/EU

BESTELL-NR:

PS-0660 Set Easy Box Modul CE mit externem Netzgerät 220-240 V/ 1,5 A 50-60 Hz
Geräte Input 24V DC, Netzkabel, Verbindungsschlauch CO₂

Es sind zwei Tecniplast Box-Adapter erhältlich:

PS-0661 Box Adapter mit Dichtungen, Typ III Käfig, Grösse 425 x 266 x 185 mm

PS-0662 Box Adapter mit Dichtungen, Typ II Käfig Grösse 267 x 207 x 140 mm
(bitte bei Bestellung angeben)

PS-0663 Verbindungsschlauch CO₂ von Easy Box Modul zum Absorber

PS-0664 CO₂ Atemkalkabsorber (Einweg Gebinde)

PS-0665 CO₂ Atemkalkabsorber Behälter mit Bodenhalterung Fassung ca. 5 Liter

PS-0667 Behälter Tecniplast Typ III

TECHNISCHE DATEN:

Gewicht:	2.5 kg (Grössen abhängig des Box des adapters Typ II or Typ III)
Gesamtgrösse:	275 x 175 x 130 mm
Spannung Eingang:	24 VDC - 1A
CO₂ Eingang:	1 - 5 Bar (15 - 70 PSI)
Ausgang:	Diameter 22 standard Schlauch